

PATENTED

TOURNIK-IT®

MADE IN ITALY



SISTEMA DI EMOSTASI PER EMORRAGIA MASSIVA



- Facile da applicare anche con una sola mano
- Regolabile per adattarsi a diversi diametri di arto
- Efficace ed immediato nel controllo delle emorragie
- Leggero e compatto, facile da trasportare



NSN 6515-15-036-5731

UDI DI BASE: 805759270TKY6

TOURNIK-IT è un sistema di emostasi utilizzato per controllare le emorragie gravi e potenzialmente letali. E' un dispositivo semplice e facile da utilizzare, specialmente in caso di traumi agli arti. Funziona comprimendo i vasi sanguigni alla radice dell'arto riducendo il flusso di sangue verso la zona interessata, permettendo così di fermare l'emorragia.

IL PRIMO CON BARRA AMOVIBILE

Il sistema di emostasi può essere utilizzato in situazioni di estrema emergenza, in presenza di emorragia massiva; Incidenti stradali - Ferite da arma da fuoco o taglio - Traumi gravi agli arti – Incidenti sul lavoro.

È importante utilizzare un **TOURNIK-IT** correttamente e solo quando necessario, poiché un uso improprio può causare danni ai tessuti o aggravare la situazione.

È fondamentale seguire le istruzioni e le linee guida per l'uso corretto di un laccio emostatico e, se possibile, ricevere una formazione specifica sull'uso di questi dispositivi.



Cintura emostatica



X-Pander Bar operativa



X-Pander Training Bar

Pennarello indelebile
per annotazioni




Componenti TOURNIK-IT

- 1) **Cintura Emostatica** velcrata da 38mm, con sistema di blocco a fibbia unica. Placca stabilizzatrice con archetto a "C" blocca barra, realizzata in Poligopa, complesso polimerico elastico ad alta tenacità, resistente agli UV, 2 nastri a scorrimento.
- 2) **X-Pander Bar**: barra operativa amovibile in Polimida, complesso polimerico ad alta tenacità, resistente agli UV, design anatomico ipergrip, con fessura di inserimento dei nastri a scorrimento. Colore nero.
- 3) **X-Pander Training Bar**: barra training amovibile in Polimida, complesso polimerico ad alta tenacità, resistente agli UV, design anatomico ipergrip, con fessura di inserimento dei nastri a scorrimento. Colore blu per training.
- 4) **Pennarello** indelebile tascabile.

Innovativo design italiano che sfrutta tecnica nota con l'aggiunta di una importante soluzione tecnologica volta al risparmio e versatilità. Infatti al raggiungimento della scadenza, la barra nera amovibile può essere sostituita con la **X-Pander Training Bar** di colore blu, trasformando il vecchio laccio emostatico non più utilizzabile in un dispositivo per training. Identificato e distinto dal colore blu della barra, convenzionalmente associata ai dispositivi per training, evitando così la confusione con lacci emostatici operativi neri scaduti.

Inoltre la X-Pander Training Bar può anche essere acquistata separatamente per riciclare tourniquet di tipo con archetto a "C", fabbricante. Una volta rimossa la vecchia barra operativa, si applica la barra blu ottenendo un laccio training nuovo e distinto. La barra blu può essere riutilizzata centinaia di volte.

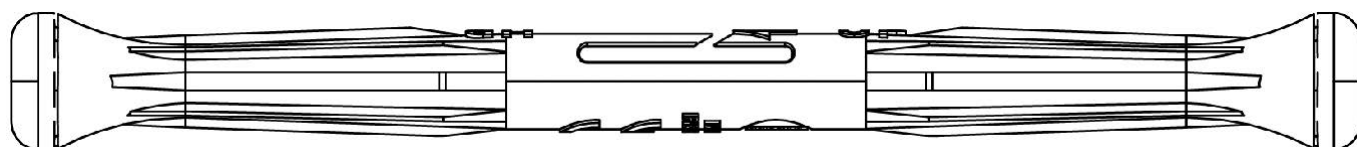

TOURNIK-IT con barra nera montata, barra blu e pennarello

Codice art. TK-00



TOURNIK-IT con barra nera montata, e pennarello

Codice art. TK-01



TOURNIK-IT con barra blu montata

Codice art. TK-02T



Cintura emostatica nera

Codice art. TK-BEN



X-Pander Training Bar

Codice art. XTB-01



X-Pander Bar operativa



Codice art. XB-01



Pennarello indelebile

Codice art. TK-PEN

TESTATO IN LABORATORIO INDIPENDENTE

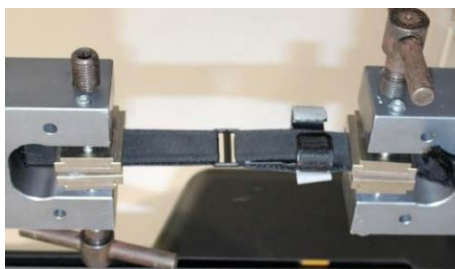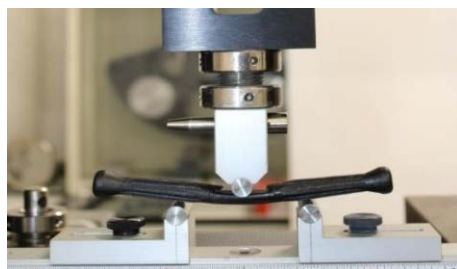

www.flamor.com
FLAMOR
S.r.l.
Tactical Medicine

FLAMOR s.r.l.
Via Biandrate, 80
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - ITALY
Tel. +39 0321 442441 - Fax +39 0321 392190
email: info@flamor.com
NATO NCage AE820

QS
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

QS
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485

PATENTED
PATENTED

Conforme al regolamento EU Medical Device Regulation (MDR), 2017/745